

LabField

064060 Meerdere Magnetische Roerstaaf



Gebbruikershandleiding

I: Productoverzicht


De Labfield multi-position magnetische roerstaaf maakt gebruik van internationaal geavanceerde ontwerpconcepten en productietechnologie, heeft een gladde en mooie uitstraling, een compacte en stevige structuur, een hoge veelzijdigheid, eenvoudige bediening en is een zeldzaam instrument voor wetenschappelijk onderzoek en experimenten.

Deze magnetische roerstaaf is voornamelijk geschikt voor laboratoriuminstrumenten voor vloeistofmenging, en wordt gebruikt voor het roeren van laagviskeuze vloeistoffen of vaste-vloeistofmengsels tegelijk, en kan worden ingesteld om synchroon of asynchroon te draaien.

II: Productoverzicht



III: Productintroductie

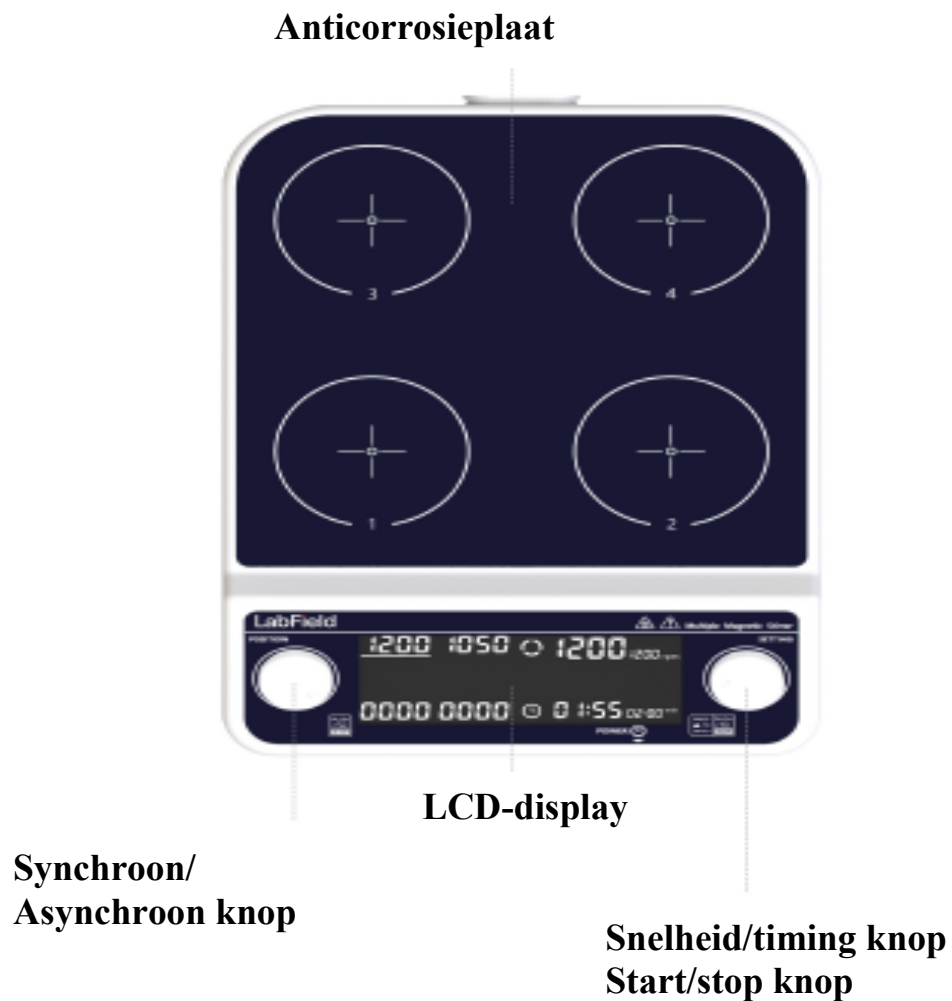

IV: Productgegevens

Besturing	Asynchroon (Synchronisatie kan ingesteld worden)
Aantal stations	4
Werkplaat grootte	4-(110*110mm)
Maximale roervolume	4*500ml
Motortype	Borstelmotor
Mengrichting	Tegenwijzerzin
RPM	50-1500 rpm
Staafgrootte	30mm
Weergavetype	LCD-display
Timing	1min-19u59min
Spanning	AC100-240V
Toegestane omgevingstemperatuur	5-40°C 80%RH
Productgrootte (MM)	320*220*65mm

V: Correct gebruik

Toepassing

- Veel gebruikt in experimenten in verschillende universiteiten, milieubescherming, volksgezondheid, epidemiëpreventie, chemische industrie, kraanwater en andere eenheden.

Gebruik

- Veel gebruikt in experimenten in verschillende universiteiten, milieubescherming, volksgezondheid, epidemiëpreventie, chemische industrie, kraanwater en andere eenheden.

Stappen voor gebruik

- Steek de stekker in en zet de schakelaar aan
- Draai de linkerknop om het station te selecteren, druk kort op de rechterknop om de parameters in te stellen
- Houd de rechterknop 2 seconden ingedrukt om te starten/stoppen
- Houd de linkerknop 2 seconden ingedrukt om te synchroniseren

Instrumentgebruikomgeving

- Alleen voor binnengebruik
- Hoogte: $\leq 2000\text{m}$
- Het werkt temperatuurbereik van het instrument is $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Het toepasselijke temperatuurbereik van het instrument is $\leq 80\%$
- Er zijn geen trillingen en luchtstromen die de prestaties beïnvloeden
- Houd een veilige afstand van 10 cm voor en achter het instrument tijdens het gebruik

Veiligheidsmaatregelen

- Het is strikt verboden om de stroomconnector in- en uit te steken en de stroomknop om te schakelen wanneer de handen nat zijn van vloeistof!
- Het is strikt verboden om de stroomstekker uit te trekken wanneer het instrument onder stroom staat!
- Het is strikt verboden om het instrument te onderhouden en schoon te maken wanneer het onder stroom staat!
- Het is strikt verboden om het instrument te installeren op een ongelijke, schommelende en trillende plaats!

Leveringslijst

- Multi-position magnetische roerstaaf
- Roerstaaf*4
- Stroomkabel
- Gebruikershandleiding

