

LabField

065760 Mini Vortex Mixer



Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse


Labfield Vortex-mikser benytter internasjonale avanserte designkonsepter og produksjonsteknologi, og har fordelene med glatt og vakkert utseende, kompakt og fast struktur, høy allsidighet og enkel betjening.

Det er et sjeldent instrument for vitenskapelig forskning. Denne vortex-mikseren brukes hovedsakelig for å forhindre blodkoagulering, immunopresipitasjon og andre lignende laboratorieformål. Det brukes hovedsakelig til molekylær hybridblod og andre prøver som trenger å blandes.

II: Produktoversikt



III: Produktintroduksjon

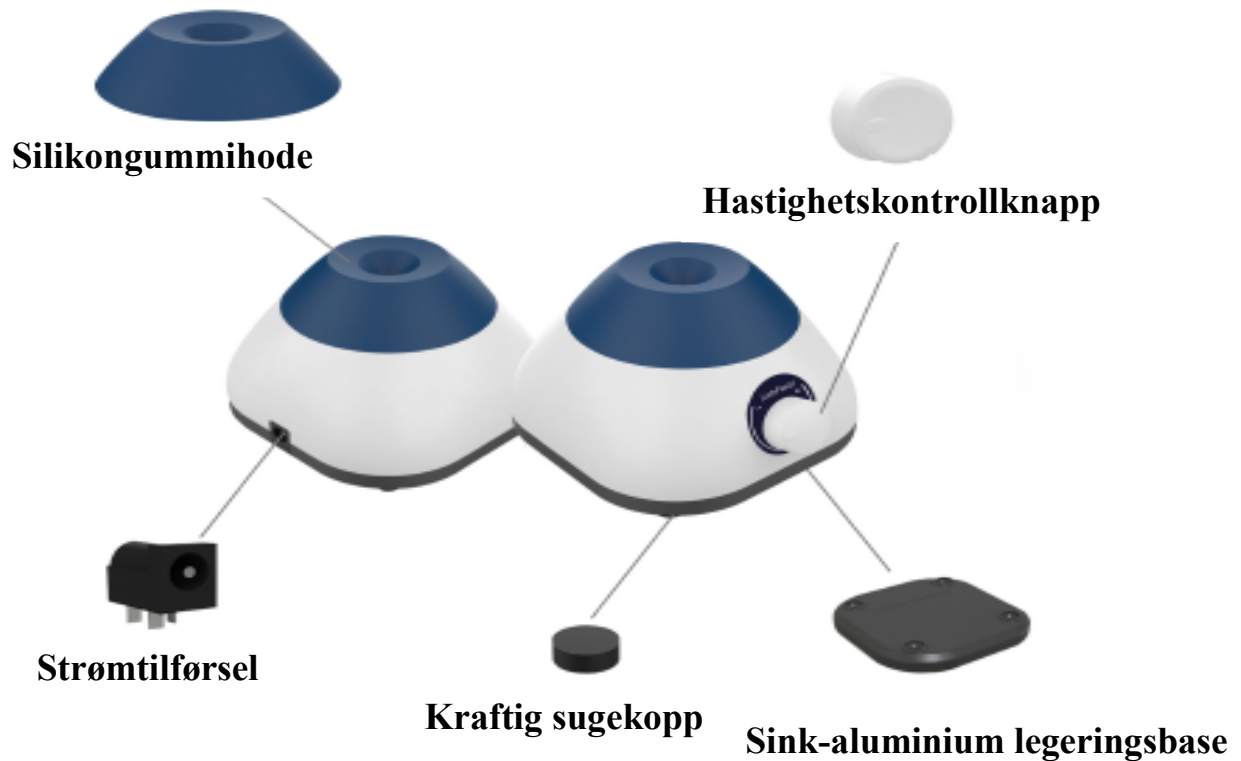

IV: Produktdata

Kontrollmodus	Hastighetsjustering
Motortype	Børsteløs motor
Orbitaldiameter (MM)	4,5 (sirkulær oscillasjon)
Maksimalt håndteringsvolum (ML)	50
Hastighetsområde (RPM)	0 - 3000
Utkoblet effekt (W)	12
Spenning	AC100-240V
Strømadapter	DC12V 1A
Tillatt relativ luftfuktighet	5~40°C, 80%RH
Produktdimensjon (MM)	100* 93* 72
Pakke­dimensjon (MM)	190* 126* 113
Produktvekt (KG)	0,56/ 0,37

V: Korrekt bruk

Bruksområde

- Det brukes hovedsakelig til molekylær hybridblod og andre prøver som trenger å blandes.

Bruk

- Det brukes mye som et eksperimentelt verktøy ved høyere utdanningsinstitusjoner, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann og medisinsk behandling.

Brukssteg

Hastighetsjustering

- Sett i stikkontakten og slå på strømmen
- Plasser sentrifugerøret eller testrøret i sentrum av silikonhetten, dreii på knappen, og trykk lett for å starte.

Instrumentbruksmiljø

- Innendørs bruk.
- Høyde: $\leq 2000\text{m}$
- Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er $\leq 80\%$
- Det er ingen vibrasjoner og luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten

Sikkerhetsforskrifter

- Ikke sett i eller trekke ut strømtilkoblingen og betjente strømbryteren når hendene er flekket med væske.
- Ikke sett i eller trekk ut strømpluggen når instrumentet er på.
- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og skrubbe instrumentet når det er påslått.
- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn og ustabil arbeidsflate.

Leveringsliste

- Mini Vortex-mikser
- Strømkabel
- Bruksanvisning



+



+

