

LabField

067970 Centrifug, Hamatokrit og PCR, 12,000 rpm



Användarmanual


I: Produktbeskrivning

Labfield hög hastighet mini-centrifug använder internationella avancerade designkoncept och tillverkningsteknik, dess utseende är slätt och vackert, strukturen är kompakt och fast, den har fördelar som hög mångsidighet, enkel drift och så vidare, ett sällsynt instrument för vetenskapliga forskningsförsök. Denna mini-centrifug används huvudsakligen för att separera de fasta partiklarna från vätskan i suspensionen. Eller för att separera två vätskemulsioner med olika densitet, den kan också användas för att ta bort vätskan från våta fasta ämnen.

II: Produktöversikt



III: Produktintroduktion

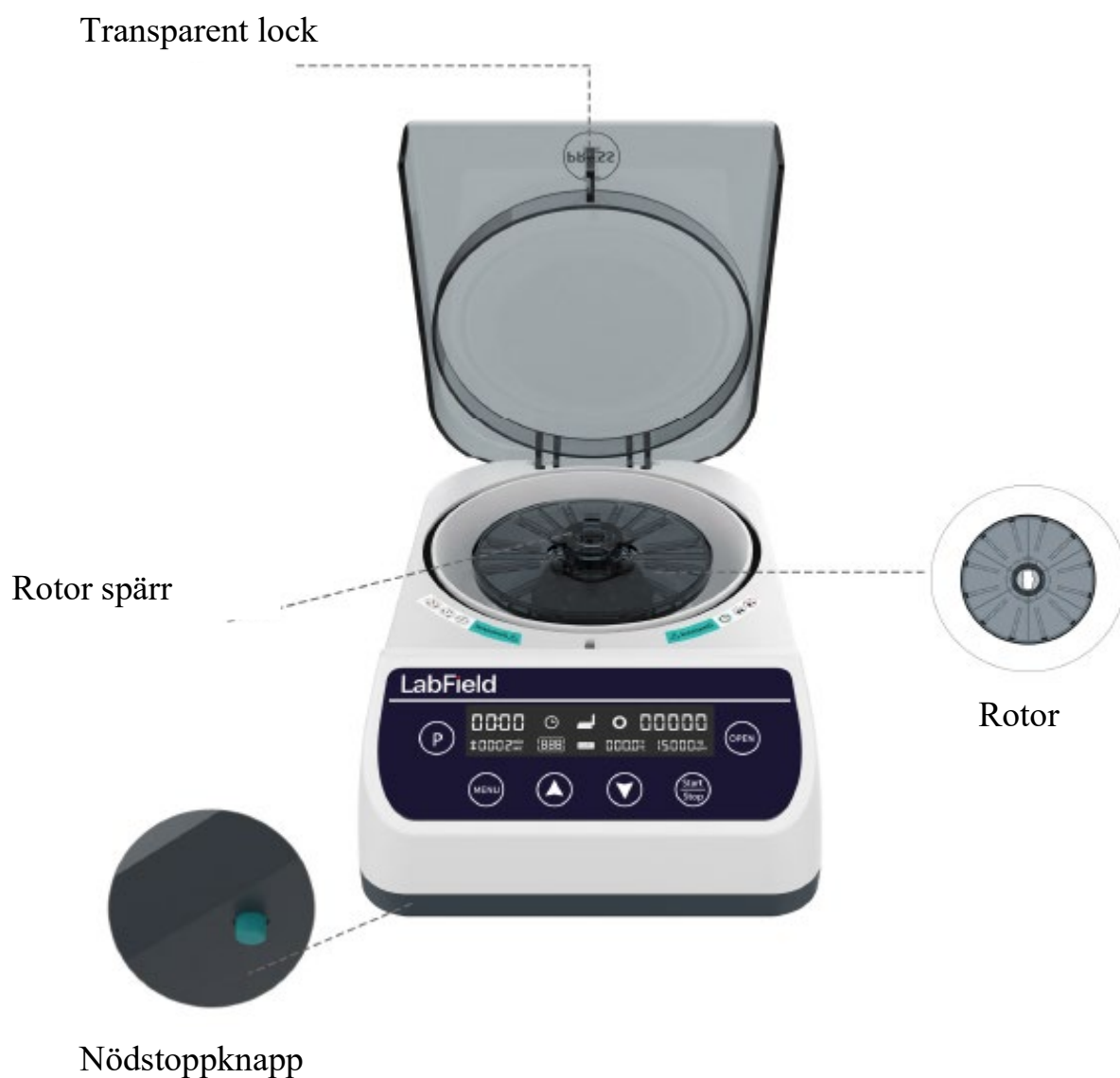

Nødstopknapp

IV: Produktdata

Kontrollmetod	PWM elektronisk hastighetsreglering
LCD-display	JA
Max RCF	9660 xg
Maximalt RPM	12000 rpm +5%
Rotorkapacitet	40 mm kapillär *12
Accelerations-/Bromstid	{<} 12 s / {<} 15 s
Ljudnivå vid maximal hastighet	S56 db(A)
Ingångseffekt	45W
Spänning / ingångsspänning	AC100-240V / DC24V
Tillåten omgivningstemperatur och luftfuktighet	5~40°C, 80%RH
Produktstorlek (MM)	270* 180* 105
Förpackningsstorlek (MM)	357* 217* 137

V: Korrekt användning

Tillämpning

- Huvudsakligen används för att separera fasta partiklar i suspension från vätska.

Användning

- Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten, medicinsk behandling och andra enheter.

Steg för användning

- Slå på strömbrytaren
- Tryck på OPEN-knappen för att slå på strömbrytaren och sätt i provet
- Tryck på MENU-knappen för att justera tid, hastighet och säker temperatur
- Tryck på STAT/STOP-knappen för att starta/stänga av
- Tryck på P-knappen för att komma ihåg flera grupper av lägen, och hämta läget för att köra
- Håll in P-knappen för gradientlägesoperation

Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk
- Höjd: ≤ 2000 m
- Instrumentets arbets temperaturintervall är $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Den tillämpliga temperaturintervallet för instrumentet är $\leq 80\%$
- Det finns ingen vibration och luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen
- Det finns inget ledande damm, explosiv gas eller korrosiv gas i den omgivande luften
- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!
- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande arbetsyta!

Leveranslista

- Mini Centrifug
- Rotor
- Adapter
- Strömkabel
- Instruktionsmanual

