




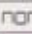



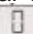
### 782180 Andningsapparat


Alkoholmätaren AL-6000 mäter alkoholhalten i frånluften och visar resultatet som alkoholkoncentration i blodet (BAC).

#### Användning av munstycket - "Active Mode"

När du använder munstycket måste du använda "Active Mode".

#### 1) Instruktion

- Tryck och håll in knappen för att slå på apparaten. När knappen hålls intryckt växlar teckenfönstret mellan  och .
- Släpp knappen när displayen visar symbolen  som indikerar att apparaten är i "Active mode".  
Nedräkningen från  till  under uppvärmningen av utandningsapparaten startar automatiskt.
- Placera läpparna runt munstycket och andas kraftigt och stadigt in i enheten i ca 5 sekunder. Du hör två pip när sensorn har tagit ditt andningsprov. Du kommer att se siffran  röra sig från vänster till höger medan alkomätaren analyserar din andedräkt. analysera provet. När analysen är klar visas alkoholkoncentrationen (BAC) på displayen.

- Resultatet visas i ca 15 sekunder, varefter apparaten stängs av automatiskt.
- Om apparaten inte kan utföra ett korrekt test, visas  på displayen och apparaten stängs av automatiskt.

#### Vad innebär resultatet

##### Säkert intervall

Från 0,00% till 0,01%.

Liten eller ingen alkoholkonsumtion

##### Måttligt intervall\*

Från 0,02% till 0,04%

Ökad alkoholkonsumtion

##### Varning\*

Från 0,05% och uppåt

Påverkad körförmåga / varningslampa tänds

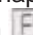




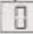
*\*Oavsett mängden alkohol som intas kan förmågan att framföra ett motordrivet fordon påverkas. Det finns ingen säker nivå av alkoholkonsumtion före körning.*


#### Utan att använda ett munstycke - "Passivt läge"

När du använder alkomätaren utan munstycke ska du använda "Passivt läge". Testet går snabbare och enklare och resultatet visas som ett intervall:

   istället för ett numeriskt värde.

#### 1) Instruktion

- Tryck och håll in knappen för att slå på apparaten. När knappen hålls intryckt växlar teckenfönstret mellan  och .
- Släpp knappen när displayen visar symbolen  som indikerar att enheten är i "Passivt läge".  
Nedräkning  till  startar automatiskt när alkometeren värms upp.
- Blås kraftigt och stadigt in i enheten i ca 5 sekunder. Du hör två pip när sensorn är klar med att ta ditt utandningsprov. Du kommer att se siffran  röra sig från vänster till höger medan alkomätaren analyserar provet. När analysen är klar visas alkoholkoncentrationen (BAC) på displayen.

- d) När du ser  igen efter testet kan du omedelbart utföra ett nytt test i "Passive Mode".

### Vad innebär resultatet

#### Säkert intervall

Från 0,00% till 0,01% . 

Liten eller ingen alkoholkonsumtion

#### Måttligt intervall\*

Från 0,02% till 0,04% 

Ökat alkoholintag

#### Varning\*

Från 0,05% och över 

Påverkad körförmåga / varningslampa tänds

*\*Oavsett mängden alkohol som intas kan förmågan att framföra ett motordrivet fordon påverkas. Det finns ingen säker nivå av alkoholkonsumtion före körning.*

### Några fakta om användningen

Uppvärmningstid: under 30 sekunder.

Svarstid för "Active Mode": inom 5 sekunder

Svarstid för "Passive Mode": inom 3 sekunder

Sensor: Oxidhalvledaralkoholsensor

Strömförsörjning: 2 x 1,5 V AA-batterier

Antal tester per batteribyte: ca 200 tester

Vikt: 117 gram



Storlek: 125 x 65 x 38 mm (h x l x b)

Varning indikeras med tre ljudsignaler när alkohol indikeras.

Stängs av automatiskt 1 minut efter senaste användning.

### Varningar

- a) Vänta minst 20 minuter efter intag av mat och dryck innan du testar. Eventuell kvarvarande alkohol i munnen och saliven kan påverka resultatet och kräver minst 20 minuter för att försvinna. Detta gäller även alkohol i munsölj och liknande produkter.
- b) Undvik att utföra tester i områden med kraftiga vindar eller dålig ventilation. Dålig ventilation kan också påverka uppvärmningstiden mellan varje test.

- c) Blås inte in rök, saliv eller något annat i munstycket eftersom sensorn då kan skadas.
- d) Använd inte AL-6000 som hjälpmedel vid rattfylleri.
- e) Enheten får inte utsättas för extrema temperaturer och ska förvaras oåtkomligt för barn.
- f) För att bibehålla noggrannheten rekommenderas kalibrering var sjätte månad till vart fjärde år.
- g) Varning "Flo"  : Om du ser "Flo" i skivspelningen har du inte blåst tillräckligt kraftigt i munstycket.  
Slå på apparaten igen och gör ett nytt test genom att blåsa kraftigt i munstycket.
- h) Varning "Cal" : Om du ser "Cal" i displayen, byt ut sensormodulen. Sensormodulen har artikelnummer 7821.84.
- i) Varning "Bat"  : Om du ser "Bat" i skivspelaren indikerar det att batteriet måste bytas ut.



Ta bort batteriluckan i slutet av alkomätaren och sätt i två nya 1,5V "AA"-batterier. Se till att placera batterierna på rätt sätt enligt +/- -markeringarna.

### Ansvarsfriskrivning

Tillverkaren, importören och distributören fransäger sig allt ansvar för användningen av denna produkt.

Produkten får inte användas som ett verktyg för att avgöra om en person är lämplig att köra bil eller liknande.

Att dricka alkohol påverkar reflexer och omdöme.